


Betjening af HeartOn A15 AED

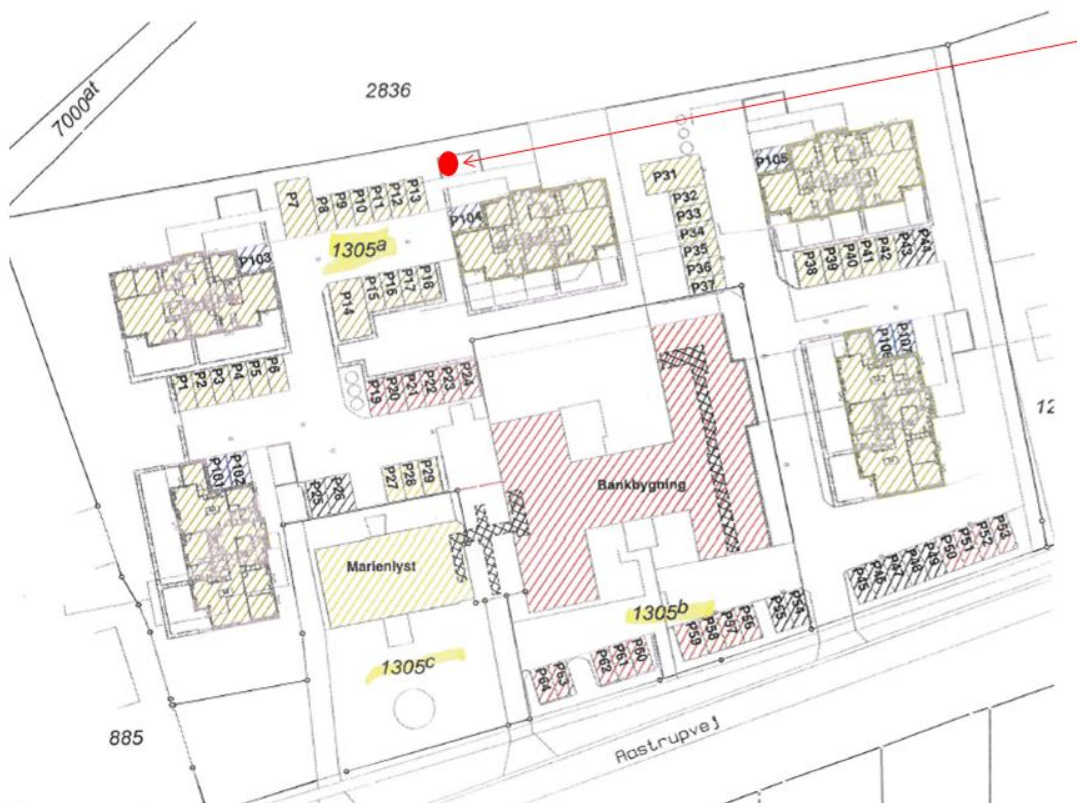

Aastrupvej 11-13, 6100 Haderslev

Step 1

- "Undersøg om der er respons fra patienten. Er du OK?"



Figur 7. HeartOn A15: Handlingsikon – Step 1

Step 2

- "Ring efter hjælp."



Figur 8. HeartOn A15: Handlingsikon – Step 2

Note: ERC 2015 Retningslinjer anbefaler, at utrænede brugere bør kontakte 112. Derfor er processen for "ring efter hjælp" placeret under step 2.

Step 3

- "Åben for luftvejene."



Figur 9. HeartOn A15: Handlingsikon – Step 3

Note: ERC 2015 retningslinjer viser, at brugeren skal åbne for luftvejene, før der tjekkes for vejtrækning.

Step 4

- "Tjek vejtrækningen."



Figur 10. HeartOn A15: Handlingsikon – Step 4

Step 5

Fjern tøj fra at blotte patientens brystkasse. Har patienten meget brystbehåring, barberes området, hvor puderne påsættes.

- "Fjern tøj fra patientens bryst. Placer pads, som vist på billedet. Tryk puderne godt fast på patientens bryst."

Når pads frakobles AED, vil følgende talebesked blive udsendt:

- "Sæt elektroderne i stikket, sørg for kontakt"

Når pads ifølge taleprompten er forbundet til AED, vil følgende taleprompt blive

udsendt:

- "Voksen pads" eller "Pædiatrisk pads"



Figur 11. HeartOn A15: handlingsikon – Step 5



Voksen: alder > 8, vægt ≥ 25kg(55lbs)

Pædiatrisk: alder ≤ 8, vægt < 25kg(55lbs)

Figur 12. Placering af pads



WARNING

Påsæt nyligt åbnede og uskadede pads, indenfor holdbarhedsdato til rengjort og tør hud for at minimere forbrænding.

Step 6

Når puderne er korrekt påsat, vil følgende taleprompt blive udsendt:

- "Analyserer hjerterytmen. Rør ikke patienten."
- "Stød anbefales. Oplader. Rør ikke patienten."
eller
- "Analyserer hjerterytmen. Rør ikke patienten."
- "Stød anbefales ikke."



Figur 13. HeartOn A15: Handlingsikon – Step 6

Note: Hvis "Stød anbefales ikke", vil AED'en fortsætte til step 8, som viser hvordan man udfører hjertemassage.

Note: AED'en udfører step 6 med det samme, den er sat til. AED'en udfører step 6, så snart den tændes efter at redderen har påsat padsne på patienten. Step 6 startes også, hvis pads påsættes patienten, selvom AED kun er nået til step 1 til 5. Dette kan reducere forberedelsestiden til det elektriske stød, hvis det er en trænet bruger, som udøver førstehjælpen.

Note: Følg anvisningerne fra talebeskeden. Det er vigtigt at ingen rører patienten mens AED'en analyserer. Når analysen er gennemført, foreslår AED den anbefalede behandling. Sørg for at holde patienten i ro. Bevæger patienten sig, kan det føre til en ukorrekt, forsinket eller mindre korrekt diagnosering og behandling.

Step 7

- "Tryk på den røde blinkende knap nu. Afgiv stød nu." {Gentag 2 gange}
- "Stød afgivet"

Hvis der ikke trykkes på stød-knappen vil følgende talebesked blive udsendt:

- "Tryk på den røde blinkende knap nu. Afgiv stød nu." {Gentag 2 gange}
- "Stød-knap ikke aktiveret"

Når EKG-rytmen ændres til en ikke-chokbar rytme, eller når pads er afbrudt, vil følgende talebesked udsendes:

- "Tryk på den blinkende knap nu. Afgiv stød nu." {Gentag 2 gange}
- "Stød afbrudt."



Figur 14. HeartOn A15: Handlingsikon – Step 7

Note: Hjertestarteren vil kun anbefale stød, hvis det skønnes nødvendigt. En talebesked vil fortælle, hvornår stød-knappen skal trykkes på for at afgive den defibrillerende energi.

Step 8

- "Det er sikkert at røre patienten."
- "Påbegynd hjertemassage." [Bip] eller "Påbegynd hjertemassage om nødvendigt." [Bip]
- "Pust to gange."
- "Det er sikkert at røre patienten."
- "Påbegynd hjertemassage." [Bip] eller "Påbegynd hjertemassage om nødvendigt." [Bip] {Gentag 5 gange}
- "Stop hjertemassagen."
- "Voksen pads" eller "Pædiatrisk pads"



Figur 15. HeartOn A15: Handlingsikon – Step 8

Note: Hvis du hører følgende besked mens hjertestarteren analyserer, bør følgende handlinger påbegyndes:

- Rytme ændrer sig, "Stød aflyst.":
Fortsæt til step 5. → Fortsæt til step 6. → EKG analyserer igen → Ikke-stødbar rytme → Fortsæt til step 8.
eller
Fortsæt til step 5. → Fortsæt til step 6. → EKG analyserer igen → stødbar rytme → Fortsæt til step 7. → Fortsæt til step 8.

Note: Når step 8 er afsluttet, går hjertestarteren tilbage til step 6 for igen at analysere hjerterytmen.

Note: Hvis elektroderne er fjernet, startes fra step 5. Hvis ikke, startes fra step 6.

- "Stød knap ikke aktiveret"
Fortsæt til step 8. → Begynd hjertemassage.

- "Lavt batteriniveau, indsæt nyt batteri":
Efter batteriet er udskiftet med et nyt fortsættes til step 1 og gennemfør "power on" testen.